

RADIOMETER 

## Analizador **ABL90 FLEX** El tiempo a su favor

Menú de tests

pH | pCO<sub>2</sub> | pO<sub>2</sub> | sO<sub>2</sub> | ctHb | FO<sub>2</sub>Hb | FCOHb |  
FMetHb | FHHb | FHbF | cK<sup>+</sup> | cNa<sup>+</sup> | cCa<sup>2+</sup> |  
cCl<sup>-</sup> | cGlu | cLac | ctBi | Crea



## **ABL80 BASIC** Lo básico en gasometrías de calidad

Menú de tests

pH | pCO<sub>2</sub> | pO<sub>2</sub> | Hct | cK<sup>+</sup> |  
cNa<sup>+</sup> | cCa<sup>2+</sup> | cCl<sup>-</sup> | cLac



## **ABL800** Simplicidad y exactitud

Menú de tests

pH | pCO<sub>2</sub> | pO<sub>2</sub> |  
sO<sub>2</sub> | ctHb | FO<sub>2</sub>Hb | FCOHb | FMetHb | FHHb | FHbF |  
cK<sup>+</sup> | cNa<sup>+</sup> | cCa<sup>2+</sup> | cCl<sup>-</sup> | cGlu | cLac | ctBil | Crea



# DETERMINE™ HIV-1/2 TEST

Rapid HIV screening, tested by billions, proven by practice.



**EASY-PEEL DESICOVER  
PROTECTS TEST**



**CLEAR DEPENDABLE  
RESULTS IN JUST 15 MINS**



**SIMPLE PROCEDURE,  
EASY TO USE**

## QUALITY COUNTS

We know that quality counts and we know that quality isn't easy. Manufactured in Japan, the Alere Determine™ HIV-1/2 test is produced under the highest quality standards. For our manufacturing team, quality is a way of life and a commitment to provide the products you deserve, every time.

## COMPACT AND FLEXIBLE FOR STORAGE AND SHIPPING

Designed with a wide temperature range, providing you with flexible storage options to suit your environment.

Clever packaging design means easier storage and shipping. Small and lightweight, the Alere Determine™ HIV-1/2 test allows you to maximize your valuable storage space. The removal of unnecessary packaging materials greatly reduces shipping costs while also producing less waste, for a better impact on the environment.



100 TESTS = 106g



EASY TO STACK MULTIPLE KITS FOR COMPACT STORAGE



Accurate answers to difficult questions

# DETERMINE SYPHILIS TP TEST<sup>TM</sup>

PROVIDING YOU WITH THE TOOLS TO RAPIDLY  
DIAGNOSE SYPHILIS AT THE POINT-OF-CARE

## RAPID

Provides accurate and reliable results in just 15 minutes, ensuring testing and treatment of patients in the same visit.

## CONVENIENT

The test is easy to transport and store, with no refrigeration required and storage conditions of 2-30°C. No power or water source is needed to run the test.


## FLEXIBLE

The test can use whole blood, serum or plasma.  
Collection can be by fingerstick or venipuncture.

## PROCEDURE


1

Prepare Test  
Tear one strip from the right and remove cover.

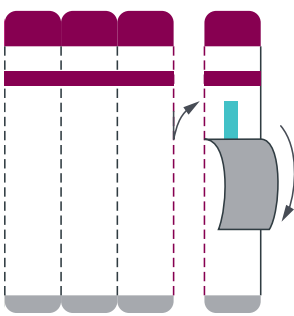


2

Add Sample  
Add 50 µL sample to pad.  
If using whole blood, add one drop of chase buffer 1 minute after applying whole blood to pad.

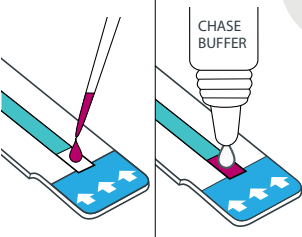








3

Read Results  
Wait 15 minutes and read the results.



RESULT KEY



LINE	POSITIVE	NEGATIVE	INVALID
CONTROL			
PATIENT			

Refer to the User Guide and Product Insert for complete instructions.

bioerix

SIEMPRE LAS MEJORES MARCAS  
NUNCA SÓLO ESO